Dochet NO. PS187US Priority Document

# **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 17 679.9

Anmeldetag:

17. April 2003

Anmelder/Inhaber:

Bruker AXS GmbH,

76187 Karlsruhe/DE

Bezeichnung:

Röntgen-optisches System mit Wobbel-

Einrichtung

IPC:

G 01 N 23/20

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

> München, den 05. Februar 2004 **Deutsches Patent- und Markenamt** Der Präsident

Im Auftrag

Stark

Anmelder:

Stuttgart, den 16.04.2003 P8187 B/P

5 Bruker AXS GmbHÖstliche Rheinbrückenstr. 5076187 Karlsruhe

Vertreter:

10

Kohler Schmid + Partner Patentanwälte GbR Ruppmannstraße 27 D-70565 Stuttgart

15

### Röntgen-optisches System mit Wobbel-Einrichtung

20

Die Erfindung betrifft ein Röntgen-optisches System mit einer Röntgen-Quelle, von der Röntgen-Strahlung auf eine zu untersuchende Probe geführt wird, und einem Röntgen-Detektor zum Empfang von an der Probe gebeugter oder gestreuter Strahlung, wobei zwischen der Quelle und der Probe und/oder zwischen der Probe und dem Detektor ein strahlführendes Röntgen-optisches Element, wie beispielsweise ein Kollimator, eine Mono- oder Polykapillare, ein Röntgen-Spiegel oder ein Monochromator angeordnet ist.

30

25

Bruker AXS 16.04.2003 P8187

Röntgen-optische Systeme dieser Gattung sind in fast allen handelsüblichen Röntgendiffraktometern realisiert, beispielsweise im "ATX-G Optical system", The Rigaku Journal, Vol. 16, No. 1, 1999, Seiten 53-58.

Zur Untersuchung der Materialeigenschaften von Proben unterschiedlichster Art werden Röntgenstrahlen eingesetzt. Diese können auf vielfältige Weise mit den Atomen der Probe wechselwirken, wobei ein Teil der einfallenden Strahlen in probenspezifische Raumrichtungen gestreut oder gebeugt werden kann, oder wobei die Probe ihrerseits zur Emission von Strahlung angeregt werden kann. Aus den Produkten der Wechselwirkung kann auf die Materialeigenschaften rückgeschlossen werden kann.

Röntgenstrahlung wird dabei üblicherweise als räumlich eng begrenzter Strahl auf die Probenoberfläche gerichtet. Der Strahldurchmesser begrenzt dabei den Probenbereich, aus dem Informationen gewonnen werden, und bestimmt das Auflösungsvermögen des Röntgen-optischen Systems insgesamt. Der Strahldurchmesser im Bereich der Probe beträgt bei typischen Röntgendiffraktometern zwischen 500 µm und 50 µm.

Untersuchungsobjekte, die Kristallite (einheitlich streuende Bereiche) mit einem

15

20

Durchmesser größer gleich der Größenordnung des Strahldurchmessers aufweisen, erzeugen im 3-dimensionalen Winkelraum Beugungsmuster diskrete Intensitätsmaxima. Entsprechend große Kristallite können zum Beispiel beim abnormalen Kornwachstum in Metallen auftreten, oder auch gewünschte Produkte eines Herstellungsprozess sein. Bei vielen Methoden der Röntgenanalyse, etwa einem einfachen theta-2theta scan, können diese diskreten Intensitätsmaxima zur Verfälschung oder gar zum kompletten Ausfall von Beugungsreflexen infolge der zufälligen, ungleichmäßigen Orientierungsverteilung der wenigen bestrahlten Kristallite in der Probe führen.

Diese als Korngrößeneffekt bezeichnete Erscheinung ist in der Regel unerwünscht. Vielmehr soll eine (lokal oder global) gemittelte Information über die Probe gewonnen werden.

Bruker AXS 16.04.2003 P8187

Zur Behebung dieses Problems ist es im Stand der Technik bekannt, die Probe zu einem Pulver aufzumahlen und so die Kristallitgröße zu verringern. Dadurch wird aber das Untersuchungsobjekt zerstört.

Auch ist es bekannt, die Position des Untersuchungsobjektes während der Messung zu verändern, etwa mit einem XYZ-Positioniertisch. Dadurch wird eine integrale Information über einen größeren Probenbereich erwirkt. Diese Methode ist jedoch für viele Untersuchungsobjekte nicht anwendbar, da sie aufgrund von großer Masse oder hoher Beschleunigungsempfindlichkeit (etwa bei Flüssigkeiten) nicht oder nur sehr langsam bewegt werden können, und somit eine merkliche Vergrößerung des überstrichenen Probenbereichs in sinnvollen Messzeiträumen nicht erreicht werden kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demgegenüber, ein Röntgenoptisches System vorzustellen, mit dem auch bei grobkristallinen
Untersuchungsobjekten bei einer Röntgenanalyse über die Materialprobe
gemittelte Informationen zerstörungsfrei und ohne Beschleunigung des
Untersuchungsobjektes gewonnen werden können.

Diese Aufgabe wird auf überraschend einfache, aber wirkungsvolle Weise bei einem Röntgen-optischen System der eingangs vorgestellten Art dadurch gelöst, dass eine Wobbel-Einrichtung vorgesehen ist, mittels der das Röntgen-optische Element während der Messung oszillierend bewegbar ist.

Durch die oszillierende Bewegung des strahlführenden Röntgen-optischen Elements wird der informationsliefernde Bereich auf der Probe ebenfalls oszillierend verändert, d.h. auf der Probe bewegt. Der informationsliefernde Bereich kann durch den Strahlfleck des einfallenden Röntgenstrahls und/oder durch den Abtastbereich des Detektors begrenzt sein.

Durch die zeitliche Veränderung des informationsliefernden Bereichs auf der Probe wird effektiv eine Mittelung über den während einer Messung überstrichenen (d.h. ausgeleuchteten bzw. abgetasteten) Probenbereich erzielt.

Bruker AXS 16.04.2003 P8187

· :



15

30

Ist das während einer Messung ausgeleuchtete Probenvolumen groß gegenüber dem Volumen eines Kristallits, so ist eine Verfälschung der Röntgenanalyse durch Korngrößeneffekte erfindungsgemäß weitgehend ausgeschlossen.

5

10

15

20

25

30

Besonders geeignet für eine Wobbeleinrichtung sind Röntgen-optische Elemente, die zumindest einenends eine gewisse Flexibilität aufweisen wie Glaskapillaren oder Polykapillaren. Das flexible Ende ist dann mit der Wobbel-Einrichtung verbunden und weist auf die Probe. Das andere Ende weist auf die Röntgenquelle oder den Detektor.

Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Röntgen-optischen Systems ist dadurch gekennzeichnet, dass die Oszillationsfrequenz der Wobbel-Einrichtung so gewählt ist, dass während einer Messung mindestens eine halbe, vorzugsweise ein ganzzahliges Vielfaches einer halben Oszillation ausgeführt wird. Dies bewirkt bei einer eindimensionalen Oszillation und Start an einem der beiden Randpunkte die vollständige Berücksichtigung des überstreichbaren Probenbereichs während einer Messung. Durch das ganzzahlige vielfachmalige Ausführen einer halben Oszillation wird jeder Abschnitt des überstrichenen Probenbereichs in etwa mit der gleichen Zeit in der Mittelung berücksichtigt, wobei von einer gleichmäßigen Oszillationsgeschwindigkeit während einer Oszillation ausgegangen wird. Besonders bevorzugt ist die Oszillationsfrequenz so gewählt, dass während einer Messung genau eine Oszillation ausgeführt wird. In diesem Fall kann eine mechanisch schonende langsame Oszillationsfrequenz gewählt werden, ohne dass auf den phasenrichtigen Startpunkt einer eindimensionalen Oszillation geachtet werden muss.

P.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann die Wobbel-Einrichtung mindestens zwei voneinander unabhängige Oszillationsbewegungen des Röntgen-optischen Elements bewirken. Dadurch kann der überstrichene Probenbereich erheblich vergrößert werden. Bevorzugt sind die beiden unabhängigen Oszillationsbewegungen zueinander im Wesentlichen

Bruker AXS 16.04.2003 P8187

orthogonal, betrachtet in der Auswirkung auf den überstrichenen Probenbereich.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Röntgen-optischen Systems sind die Amplituden der Wobbel-Einrichtung so einstellbar, dass auf der Probe gewählte, vorgebbare Bereiche überstrichen werden. Die vorgebbaren Bereich können insbesondere Rechteckflächen oder Kreisflächen mit definierten Abmessungen sein. Dadurch kann die aus der Röntgenanalyse gewonnene Information definiert lokalen Probenbereichen zugeordnet werden.

10

15

20

25

Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform, bei der sowohl quellenseitig als auch detektorseitig jeweils eine Wobbel-Einrichtung vorgesehen ist, deren Oszillationsbewegungen miteinander synchronisiert sind. Durch eine einseitige Oszillationsbewegung kann die Bragg-Bedingung verletzt werden, was zu einem Verlust an Intensität im Detektor führt. Durch synchronisiertes Oszillieren sowohl quellenseitig als auch detektorseitig kann die Bragg-Bedingung durch geeignetes Nachführen eines zweiten Röntgenoptischen Elements stets eingehalten werden, so dass besonders gute Signalzu-Untergrund-Verhältnisse erhältlich sind. Das synchronisierte Wobbeln ist außerdem notwendig, wenn der Strahlfleck des auf die Probe treffenden Röntgenstrahls und der Erfassungsbereich (Abtastbereich) des Detektors ungefähr gleich groß sind. In diesem Fall müssen Strahlfleck und Erfassungsfleck während der Oszillation streng in Deckung bleiben, um am Detektor Intensität zu erhalten. Sind hingegen Strahlfleck und Erfassungsfleck stark unterschiedlich groß, so genügt es erfindungsgemäß, den kleineren Fleck zu wobbeln.

.

Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsform, welche vorsieht, dass die Wobbel-Einrichtung ein Piezo-Element umfasst. Ein Piezo-Element kann sehr schnell und exakt kleine Bewegungen elektrisch gesteuert ausführen.

Bruker AXS 16.04.2003 P8187

· :. .

Schließlich wird eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Röntgenoptischen Systems bevorzugt, bei der die Amplitude der Wobbel-Einrichtung derart eingestellt ist, dass Winkeländerungen der auf die Probe auftreffenden bzw. der vom Detektor erfassten Röntgen-Strahlung weniger als 1°,

vorzugsweise weniger oder ungefähr gleich 0,5° betragen. Bei einer solchen Winkelabweichung von der idealen Bragg-Position ist in aller Regel noch eine ausreichende Intensität von Röntgenstrahlung am Detektor zu erwarten. Bevorzugt beträgt die Winkeländerung durch die Wobbeleinrichtung maximal eine halbe Breite der vollen Halbwertsbreite FWHM (full width at half maximum) eines typischen Röntgenreflexes in einem mit dem Röntgen-optischen System wobbelfrei aufgenommenen Röntgenmuster.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso können die vorstehend genannten und die noch weiter ausgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schilderung der Erfindung.

20

25

30

15

Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:



- Fig. 1 eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Röntgenoptischen Systems in Reflektionsgeometrie mit zwei Wobbeleinrichtungen;
- Fig. 2 eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Röntgenoptischen Systems in Transmissionsgeometrie mit zwei Wobbeleinrichtungen.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Röntgen-optischen Systems. Eine Röntgenquelle 1

Bruker AXS 16.04.2003 P8187

. . . .

emittiert einen divergenten Röntgenstahl 2. Dieser wird durch ein erstes Röntgen-optisches Element 3, hier eine Monokapillare, gebündelt und auf eine Probe 4 geführt. Der Röntgenstrahl 2 wechselwirkt mit der Probe 4, wobei ein ausgehender Röntgenstrahl 5 entsteht. Dieser wird in einem zweiten Röntgenoptischen Element 6, das ebenfalls als Monokapillare ausgebildet ist, gebündelt und auf einen Röntgendetektor 7 fokussiert. Röntgenquelle 1 und Röntgendetektor 7 sind auf einer Seite der näherungsweise, aber nicht zwingend ebenen Probe 4 angeordnet, so dass diese Ausführungsform zu Messungen in Reflektionsgeometrie geeignet ist.

10

15

20

25

30

Das erste Röntgen-optische Element 3 ist mit seinem der Röntgenquelle 1 zugewandten Ende an einem Kugelgelenk 8 gelagert. Das erste Röntgen-optische Element 3 kann mittels nicht eingezeichneter Piezoelementen in der Zeichenebene in Pfeilrichtung 9 oder auch senkrecht zur Zeichenebene in Pfeilrichtung 10 oszillierend verschwenkt ("gewobbelt") werden. Die Piezoelemente und das Kugelgelenk 8 sind damit die wesentlichen Teile einer Wobbeleinrichtung. Dadurch wird ein Strahlfleck 11 des einfallenden Röntgenstrahls 2 auf der Probe 4 bewegt. Dabei bleiben sowohl die Röntgenquelle 1 als auch die Probe 4 und der Detektor 7 in Ruhe. Durch die Bewegung des Strahlflecks 11 auf der Probe 4 wird ein größerer Teilbereich der Probe 4 in die Messung einbezogen und in einem zeitlich integrierten Messsignal des Detektors 7 berücksichtigt.



Das zweite Röntgen-optische Element 6 bildet vom Bereich des Strahlflecks 11 ausgehende Röntgenstrahlen 5 auf den Detektor 7 ab. Insofern sind in der gezeigten Abbildung Strahlfleck 11 und der Abtastbereich des Detektors 7 auf der Probe 4 deckungsgleich. Um während einer Oszillation des Strahlflecks 11 auf der Probe immer noch Nutzsignal im Detektor 7 zu erhalten, muss das zweite Röntgen-optische Element 6 in synchronisierter Weise zum ersten Röntgen-optischen Element 3 mitoszillieren. D.h. der Strahlfleck 11 und der Abtastbereich des Detektors 7 müssen in Deckung (Überlappung) gehalten werden. Dazu ist das zweite Röntgen-optische Element 6 am detektorseitigen Ende an ein Kugelgelenk 12 angelenkt. Zwei nicht dargestellte Piezoelemente

· :. .

erlauben eine Verschwenkung des zweiten Röntgen-optischen Elements 6 in grob vertikaler Richtung in der Zeichenebene in Pfeilrichtung 13 sowie in grob horizontaler Richtung senkrecht zur Zeichenebene in Pfeilrichtung 14.

Die Piezoelemente des ersten und des zweiten Röntgen-optischen Elements 3, 6 sind an eine elektronische Steuerung angeschlossen, die die Oszillationen der Röntgen-optischen Elemente 3, 6 untereinander und mit der Zeitdauer einer Einzelmessung abstimmt. Während einer Einzelmessung, d.h. während der Signalaufnahme am Detektor 7 während einer gleichbleibenden Proben-, Röntgenquellen- und Detektorstellung, führen die Röntgen-optischen Elemente 3, 6 in der gezeigten Ausführungsform genau eine vollständige Oszillation in jeder Pfeilrichtung 9, 10, 13, 14 aus.

Fig. 2 zeigt eine alternative Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Röntgen-optischen Systems. Bei dieser Ausführungsform sind eine
Röntgenquelle 1 und ein Röntgendetektor 7 auf gegenüberliegenden Seiten
einer näherungsweise, aber nicht zwingend ebenen Probe 4 angeordnet, so
dass diese Ausführungsform für Messungen in Transmissionsgeometrie
geeignet ist.

20

25

30

Im Übrigen entspricht diese Ausführungsform der Ausführungsform von Fig. 1. Ein auf die Probe 4 einfallender Röntgenstrahl 2 wird von einem ersten Röntgen-optischen Element 3 fokussiert. Ein durch Wechselwirkung mit der Probe 4 entstandener ausgehender Röntgenstrahl 5 wird von einem zweiten Röntgen-optischen Element 6 auf den Detektor 7 fokussiert. Das erste Röntgen-optische Element 3 kann zur Verschiebung eines Strahlflecks auf der Probe 4 in Pfeilrichtungen 15, 16 gewobbelt werden. Das zweite Röntgen-optische Element 6 kann zur Verschiebung des Abtastbereichs des Detektors 7 auf der Probe 4 in Pfeilrichtungen 17, 18 gewobbelt werden. Das Wobbeln ermöglicht die Vergrößerung des Informationen bereitstellenden Bereichs der Probe 4 während einer Einzelmessung.



P8187

· :. .

#### <u>Patentansprüche</u>

Röntgen-optisches System mit einer Röntgen-Quelle (1), von der Röntgen-Strahlung (2) auf eine zu untersuchende Probe (4) geführt wird, und einem Röntgen-Detektor (7) zum Empfang von an der Probe (4) gebeugter oder gestreuter Strahlung (5), wobei zwischen der Quelle (1) und der Probe (4) und/oder zwischen der Probe (4) und dem
 Detektor (7) ein strahlführendes Röntgen-optisches Element (3, 6), wie beispielsweise ein Kollimator, eine Mono- oder Polykapillare, ein Röntgen-Spiegel oder ein Monochromator angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

15

- dass eine Wobbel-Einrichtung vorgesehen ist, mittels der das Röntgenoptische Element (3, 6) während der Messung oszillierend bewegbar ist.
- System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oszillationsfrequenz der Wobbel-Einrichtung so gewählt ist, dass während einer Messung mindestens eine halbe, vorzugsweise ein ganzzahliges Vielfaches einer halben Oszillation ausgeführt wird.
- System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wobbel-Einrichtung mindestens zwei voneinander unabhängige Oszillationsbewegungen (9, 10, 13, 14; 15, 16, 17, 18) des Röntgen-optischen Elements (3, 6) bewirken kann.
- 30 4. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Amplituden der Wobbel-Einrichtung so einstellbar sind, dass auf der Probe (4) gewählte, vorgebbare Bereiche überstrichen werden.



Bruker AXS GmbH 16.04.2003 P8187

- 5. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl quellenseitig als auch detektorseitig jeweils eine Wobbel-Einrichtung vorgesehen ist, deren Oszillationsbewegungen (9, 10, 13, 14; 15, 16, 17, 18) miteinander synchronisiert werden können.
- System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wobbel-Einrichtung einen motorisierten Antrieb und/oder ein Piezo-Element umfasst.

10

15


5

7. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Amplitude der Wobbel-Einrichtung derart eingestellt ist, dass Winkeländerungen der auf die Probe (4) auftreffenden bzw. der vom Detektor (7) erfassten Röntgen-Strahlung (2, 5) weniger als 1°, vorzugsweise weniger oder ungefähr gleich 0,5° betragen.



Bruker AXS GmbH 16.04.2003 P8187

**Bruker AXS** 

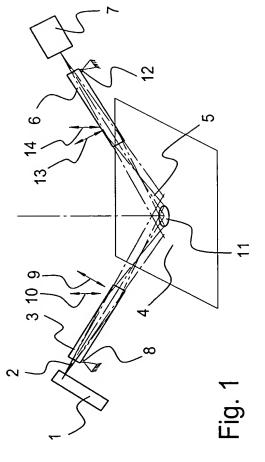


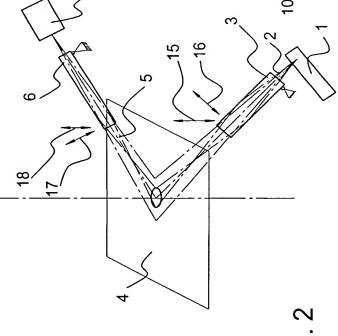


Fig. 2

### Zusammenfassung

- Ein Röntgen-optisches System mit einer Röntgen-Quelle (1), von der Röntgen-Strahlung (2) auf eine zu untersuchende Probe (4) geführt wird, und einem Röntgen-Detektor (7) zum Empfang von an der Probe (4) gebeugter oder gestreuter Strahlung (5), wobei zwischen der Quelle (1) und der Probe (4) und/oder zwischen der Probe (4) und dem Detektor (7) ein
   strahlführendes Röntgen-optisches Element (3, 6), wie beispielsweise ein
- strahlführendes Röntgen-optisches Element (3, 6), wie beispielsweise ein Kollimator, eine Mono- oder Polykapillare, ein Röntgen-Spiegel oder ein Monochromator angeordnet ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Wobbel-Einrichtung vorgesehen ist, mittels der das Röntgen-optische Element (3, 6) während der Messung oszillierend bewegbar ist.
- Mit dem erfindungsgemäßen Röntgen-optisches System können auch von Untersuchungsobjekten großer Masse bestehend aus grobkristallinem Material bei einer Röntgenanalyse gemittelte Informationen zerstörungsfrei und ohne Beschleunigung des Untersuchungsobjektes gewonnen werden. (Fig. 1)

Bruker AXS GmbH 16.04.2003 P8187

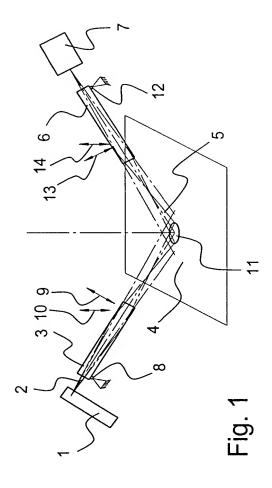

--